



FORTUNA® Dosiertechnik



FORTUNA® OPTIFIX® SOLVENT

Die langjährige Erfahrung in der Produktion von manuellen Flaschenaufsatz-Dispensern hat unsere Produkte zu anwenderfreundlichen, sicheren und präzisen Hilfsinstrumenten für das Labor gemacht, die im Laboralltag unentbehrlich geworden sind.

Wenn Sie mit Lösungsmitteln arbeiten, ist der OPTIFIX® SOLVENT die erste Wahl für Sie.

OPTIFIX® SOLVENT Technische Details

- zur Dosierung von Lösungsmitteln
- H - mit Zertifikat, einzeln nummeriert
- produziert nach DIN EN ISO 9001
- ausschließliche Verwendung hochwertiger Materialien
- mit Präzisionsdosierkolben aus Glas
- Präzisions-Dosierzylinder aus Glas, dadurch Dosierverlauf sichtbar, kunststoffbeschichtet
- Fingerschutzkappe mit Volumeneinstellsystem, die ergonomische Fingerschutzkappe besteht aus PP; die Graduierung ist auf der Skalenstange durch Laserverfahren unzerstörbar aufgebracht, für Links- und Rechtshänder, leicht verschiebbare Feinjustage, gut lesbare Skala
- Ventilblock, optimale Funktionalität und 100 %-ige Dichtheit, keine Metallfedern in den Ventilen - keine Korrosion





- FIX Adapter aus weißem PP bis Größe 10 ml, aus massivem PP ab Größe 30 ml

Flaschenaufsatzdispenser FORTUNA® OPTIFIX® SOLVENT, mit GL 32, mit 2 PP-Adaptern 40 + 45, 1 PTFE-Ansaugschlauch, VE 1

Volumen	grad.	Richtigkeit	Präzision	Art.-Nr.
0,4 - 2 ml	0,1 ml	$\leq + 0,6 \%$	$\leq + 0,2 \%$	101.081-27
1 - 5 ml	0,1 ml	$\leq + 0,6 \%$	$\leq + 0,2 \%$	101.081-33
2 - 10 ml	0,2 ml	$\leq + 0,6 \%$	$\leq + 0,2 \%$	101.081-38
6 - 30 ml	0,5 ml	$\leq + 0,6 \%$	$\leq + 0,2 \%$	101.081-44
10 - 50 ml	1,0 ml	$\leq + 0,6 \%$	$\leq + 0,2 \%$	101.081-48
20 - 100 ml	2,0 ml	$\leq + 0,6 \%$	$\leq + 0,2 \%$	101.081-51
40 - 200 ml	5,0 ml	$\leq + 0,6 \%$	$\leq + 0,2 \%$	101.081-53
60 - 300 ml*	5,0 ml	$\leq + 0,6 \%$	$\leq + 0,2 \%$	101.081-56
100 - 500 ml*	5,0 ml	$\leq + 0,6 \%$	$\leq + 0,2 \%$	101.081-58

*in Ergänzung zur ISO 8655


Poulten & Graf Ltd.

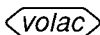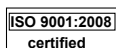


FORTUNA®

Peak Works, 1 Alfreds Way
Barking, Essex, IG11 0AS, UK
Tel.: +44 (0)20 8594 4256
Fax: +44 (0)20 8594 8419
<http://www.poulten-graf.com>
e-mail: VOLAC@poulten-graf.com

Poulten & Graf GmbH

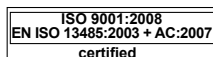

FORTUNA®

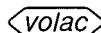

P.O. Box 1352
97863 Wertheim / Germany
Tel.: +49 9342 9229-0
Fax: +49 9342 9229-80
<http://www.poulten-graf.com>
e-mail: FORTUNA@poulten-graf.com